

Bảo vệ dòng tuần hoàn của bạn



LIFESTREAM™ Giá đỡ mạch máu mờ bằng bóng có màng phủ

Catheter Dài 135 cm / Guidewire 0.035"			
Đường kính mở của giá đỡ (mm)	Chiều dài giá đỡ phủ màng (mm)	Nền dùng Introducer	Mã sản phẩm
5	26	6F	LSM1350526
	37	6F	LSM1350537
6	16	6F	LSM1350616
	26	6F	LSM1350626
	37	6F	LSM1350637
	58	6F	LSM1350658
7	16	6F	LSM1350716
	26	6F	LSM1350726
	37	6F	LSM1350737
8	58	7F	LSM1350758
	16	7F	LSM1350816
	26	7F	LSM1350826
9	37	7F	LSM1350837
	58	7F	LSM1350858
10	38	7F	LSM1350938
	58	7F	LSM1350958
12	38	8F	LSM1351038
	58	8F	LSM1351058

Catheter Dài 80 cm / Guidewire 0.035"			
Đường kính mở của giá đỡ (mm)	Chiều dài giá đỡ phủ màng (mm)	Nền dùng Introducer	Mã sản phẩm
5	26	6F	LSM0800526
	37	6F	LSM0800537
6	16	6F	LSM0800616
	26	6F	LSM0800626
	37	6F	LSM0800637
	58	6F	LSM0800658
7	16	6F	LSM0800716
	26	6F	LSM0800726
	37	6F	LSM0800737
8	58	7F	LSM0800758
	16	7F	LSM0800816
	26	7F	LSM0800826
9	37	7F	LSM0800837
	58	7F	LSM0800858
10	38	7F	LSM0800938
	58	7F	LSM0800958
12	38	8F	LSM0801038
	58	8F	LSM0801058

Xin hãy liên hệ với đại diện nhà cung cấp tại nước bạn để có thêm thông tin về sản phẩm

AUSTRIA	Bard Medica SA, MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene, Moderecenterstraße 22, A-1030 Wien, Austria. Tel: +43 14 949130. Fax: +43 14 94913030.
BENELUX	Bard Benelux n.v., Hagelberg 2, 2250 Olen, Belgium. Tel: +32 14 286950. Fax: +32 14 286955.
CZECH REPUBLIC	Bard Czech Republic s.r.o., Taborska 619, 140 00 Prague, Czech Republic. Tel: +420 242 408630. Fax: +420 242 410 185.
FRANCE	Bard France SAS, Av. Joseph Kessel 164-166, Parklè P14, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France. Tel: +33 1 39305858. Fax: +33 1 39305859.
GERMANY	C. R. Bard GmbH, Wachhausstrasse 6, 76227 Karlsruhe, Germany. Tel: +49 721 94450. Fax: +49 721 9445111.
GREECE	Bard Hellas SA, 22, Alkiviadou St & 72, Vouliagmenis Av, 16675 Glyfada, Greece. Tel: +30 210 9690770. Fax: +30 210 9628810.
IRELAND	Bard Limited., Arena House, Arena Road, Sandycroft, Dublin 18, Ireland. Tel: +353 121 30706 Fax: +353 121 30604
ITALY	Bard S.p.A., Via Cina 444, 00144 Roma, Italy. Tel: +39 06 524931. Fax: +39 06 5295852.
NETHERLANDS	C. R. Bard Netherlands Sales B.V., Lorentzlaan 4, 3401 MX Ussestein, The Netherlands. Tel: +31 (0)88 01 22 500 Fax: +31 (0)88 01 22 501
NORDIC	Bard Norden AB, Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg, Sweden. Tel: +46 42 386000. Fax: +46 42 386010.
POLAND	Bard Poland sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, Poland, Tel: +48 22 3210930, Fax: +48 22 3210938
SPAIN	Bard de Espana S.A.U., Plaza Europa 41-43, 5a Planta, (Torre Realía), 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. Tel: +34 93 2537800 Fax: +34 93 205 82 00.
SWITZERLAND	Bard Medica SA, Seestrasse 64, 8942 Oberrieden/Zürich, Switzerland. Tel: +41 44 7225360. Fax: +41 44 7225370.
UK	Bard Limited, Forest House, Tilgate Forest Business Park, Brighton Road, Crawley, West Sussex RH11 9BP, UK. Tel: +44 1293 52955 Fax: +44 1293 552428

LIFESTREAM™ Giá đỡ mạch máu mờ bằng bóng có phủ màng

Thông tin kỹ thuật
Xem kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để có thêm thông tin về chỉ định, chống chỉ định, cảnh báo, thận trọng, tác dụng ngoại ý và cách thức vận hành.

Chỉ định
LifeStream™ Giá đỡ mạch máu mờ bằng bóng có phủ màng được chỉ định điều trị tổn thương xơ vữa của động mạch chậu chung và động mạch chậu ngoài.

Chống chỉ định
Bệnh nhân có rối loạn chảy máu chưa kiểm soát. Bệnh nhân không thể nhận đủ liều điều trị kháng đông/kháng tiểu cầu khuyến cáo. Tổn thương của bệnh nhân không cho phép mở bóng hoàn toàn. Những tổn thương mà đường kính lòng mạch sau nong bóng không đủ để đưa hệ thống can thiệp nội mạch qua. Tổn thương do chèn ép từ bên ngoài.

Cảnh báo
Giá đỡ đặt qua các phân nhánh mạch máu có thể gây giảm lưu lượng và cản trở các thủ thuật sau này. Bất cứ khi nào cảm thấy trở ngại trong khi tiến hành thủ thuật, không nên thao tác mạnh bạo. Không thử gỡ giá đỡ chưa được nong ra khỏi sheath/guiding catheter. Rút sheath/guiding catheter và cả hệ thống can thiệp nội mạch như một khối duy nhất. Cố gỡ giá đỡ chưa nong bằng cách kéo ngược giá đỡ vào sheath/guiding catheter có thể làm cho giá đỡ tuột ra. Không bơm bóng quá mức áp lực cho phép để tránh bể bóng và tổn thương mạch máu.

Thận trọng
Thận trọng khi đưa hệ thống can thiệp nội mạch qua những vị trí giải phẫu khó khăn hoặc xoắn vặn. Giá đỡ chưa được thử nghiệm trong tình huống đặt chồng lên giá đỡ của nhà sản xuất khác.

Bard, Advancing Lives and the Delivery of Health Care, and LifeStream are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc. Copyright © 2014, C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

S120581 Rev. 0

ClearStream Technologies, Ltd.
Moyné Upper
Ennisicorthy
Co. Wexford, Ireland

BARD | PERIPHERAL
VASCULAR

LIFESTREAM™

Giá đỡ mạch máu mờ bằng bóng có màng phủ

Bảo vệ dòng tuần hoàn của bạn



DK Medical

Advancing Lives and the Delivery of Health Care™

BARD | PERIPHERAL
VASCULAR

LIFESTREAM™


Giá đỡ mạch máu mở bằng bóng có màng phủ

Điều trị bệnh lý động mạch ngoại biên bắt đầu với một nền tảng lưu lượng tuần hoàn đáng tin cậy

CHÚNG TÔI CÓ lớp phủ

Khung thép không gỉ mới bao bọc hoàn toàn bằng hai lớp ePTFE

Cấu trúc ePTFE xếp mịn chứng tỏ chống tân sinh nội mạc

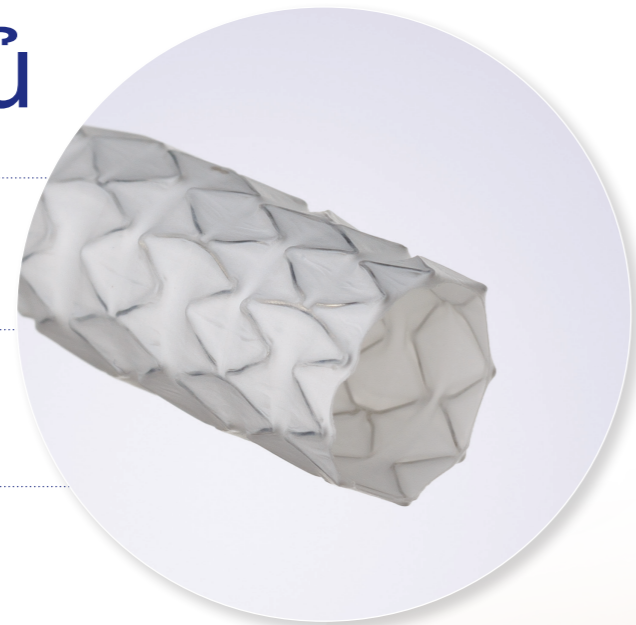

Khả năng thích ứng tuyệt vời với cấu trúc giải phẫu của mạch máu*


Khả năng dẫn thêm sau nong để phù hợp với sự thay đổi kích thước mạch máu của bệnh nhân

THỦ THUẬT an toàn LÀ ƯU TIÊN

Bóng không đàn hồi

Thiết kế bóng hình nón ngắn nhằm giảm tối thiểu nguy cơ vướng catheter trong thủ thuật kissing giá đỡ

Rút ngắn cực ít khi nong*

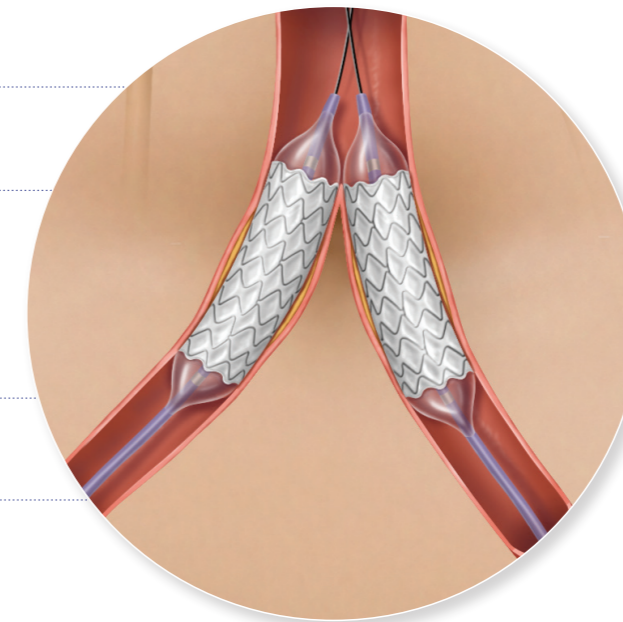


hiệu năng LÀ CAM KẾT

Kích thước gọn gàng hơn

Khả năng điều hướng xuất sắc khi bắt chéo động mạch chậu*

Trục bóng rộng gấp ba lần giúp xẹp bóng nhanh ở mạch máu lớn

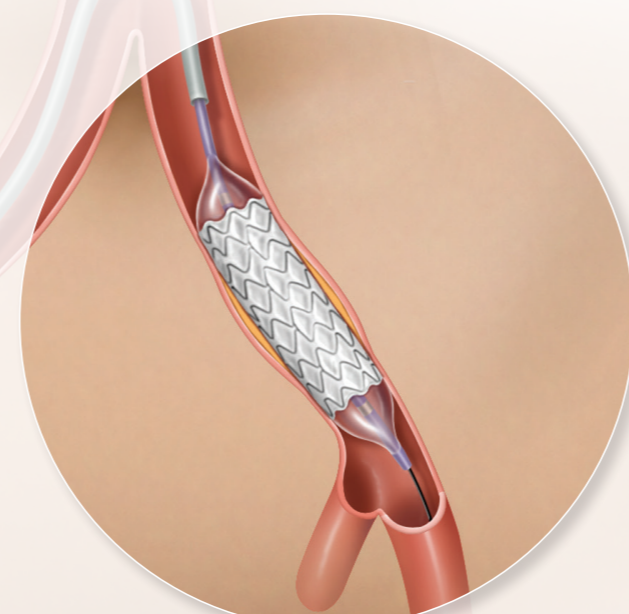

*Thử nghiệm Bench. Chi tiết xin liên hệ

VẬT LIỆU VÀ THIẾT KẾ GIÁ ĐỠ

Giá đỡ		
Thép không gỉ		
Vật liệu màng phủ		
ePTFE; Lỗ xốp 10 – 40 µm (microns)		
Thiết kế màng phủ		
Hai lớp ePTFE bao bọc giá đỡ (sandwich)		
Khả năng dẫn sau nong		
Có thể tới đường kính sau		
5 mm - 8 mm	9 mm - 10 mm	12 mm
10 mm	12 mm	N/A

CATHETER BÓNG CHẤT LIỆU VÀ THÔNG SỐ

Chất liệu bóng	
Polyamide	
Chất liệu trục thân	
- Polyamide with radiopacifier - Radiopaque marker bands	
Áp lực danh định	
8 ATM	
Áp lực tới hạn	
12 ATM	
Catheter	
80 cm and 135 cm	
Guidewire	
0.035"	
Introducer Sheath	
6F, 7F, 8F (see ordering information for detailed compatibility information by size)	
Đường kính vỏ ngoài trục thân	
5F (5 mm - 9 mm), 6.5F (10 mm, 12 mm)	

BIỂU MẪU ĐỘ DÀN HỒI BÓNG NONG

ATM	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
8	5.1	6.0	7.1	8.2	9.1	10.1	12.0
9	5.1	6.0	7.2	8.3	9.2	10.2	12.0
10	5.1	6.1	7.2	8.4	9.2	10.2	12.1
11	5.2	6.1	7.3	8.4	9.3	10.3	12.2
12	5.2	6.2	7.3	8.5	9.4	10.4	12.3